TECHNISCHE UNIVERSITÄT DORTMUND

Anfängerpraktikum Physik Sommersemester 2014

V703 Das Geiger-Müller-Zählrohr

24.06.2014

1.Abgabe: 01.07.2014

Leonard Wollenberg Joshua Luckey leonard.wollenberg@udo.edu joshua.luckey@udo.edu

1 Einleitung

2 Theorie

3 Durchführung

4 Auswertung

Im folgenden Abschnitt sind die während des Versuchs aufgenommenen Messwerte und die aus diesen berechneten Ergebnisse tabellarisch und grafisch dargestellt. An entsprechender Stelle sind Anmerkungen und Erklärungen zu den Berechnungen und Ergebnissen gegeben.

4.1 Bestimmung der Plateau-Steigung des Zählrohrs

Die für die Zählrohr-Charakteristik aufgenommenen Messwerte für Spannung U und Anzahl der registrierten Impulse P in dem Zeitintervall $\Delta t = 100\,\mathrm{s}$ sind in Tabelle 1 zu finden.

Spannung	Anzahl der Pulse	Spannung	Anzahl der Pulse
U [V]	P	U [V]	P
350 ± 1	5036 ± 70	530 ± 1	5354 ± 73
370 ± 1	4995 ± 70	550 ± 1	5002 ± 70
390 ± 1	4966 ± 70	570 ± 1	5162 ± 71
410 ± 1	5040 ± 70	590 ± 1	5185 ± 72
430 ± 1	5252 ± 72	610 ± 1	5184 ± 72
450 ± 1	5137 ± 71	630 ± 1	5292 ± 72
470 ± 1	5049 ± 71	650 ± 1	5033 ± 70
490 ± 1	5197 ± 72	670 ± 1	5297 ± 72
510 ± 1	5076 ± 71	690 ± 1	5153 ± 71

Tabelle 1: Messwerte für die Charakteristik des Zählrohrs

Diese Messwerte sind in Abbildung 1 grafisch dargestellt. Die farbigen Messwerte wurden für eine lineare Regression mit dem Ansatz

$$P(U) = A \cdot U + P_0 \tag{1}$$

verwendet. Die Durchführung der Regression unter Verwendung der Python-Bibliothek SciPy ergab die Parameter

$$A = (0.98 \pm 0.07) \,\mathrm{V}^{-1} \quad \text{und}$$
 (1a)

$$P_0 = 4631 \pm 34. \tag{1b}$$

Somit ergibt sich die Plateau-Steigung des Zählrohrs zu

$$A = (98 \pm 7) \frac{\%}{100 \text{V}}.\tag{2}$$

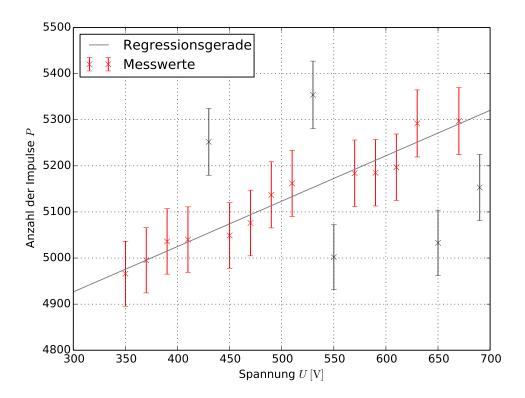


Abbildung 1: Grafische Darstellung der aufgenommenen Impulse in Abhängigkeit der Spannung mit linearer Regression des Plateaus

4.2 Bestimmung des zeitlicher Abstand zwischen Primär- und Nachentladungimpuls

Auf dem mit dem Zählrohr verbundenen Oszilloskop, lässt sich die Primärentladung als annähernd stehendes Bild einer Kurve mit der in Abb.3 [1] dargestellten Form ausmachen. Die Nachentladungen sind ebenfalls Kurven dieser Form, mit dem Unterschiede das diese nur für eine sehr kurze Zeit auf dem Bildschirm des Oszilloskops angezeigt werden.

Der mittlere zeitliche Abstand zwischen beiden Entladungen konnte, aufgrund der kurzen Zeitspanne in der beide Entladungen zu sehen sind, nur auf den Wert

$$\Delta t_{P,N} \approx 150 \,\mu\text{s}$$
 (3)

geschätzt werden.

4.3 Bestimmung der Totzeit mit Hilfe eines Oszilloskops

Die Totzeit des Zählrohrs entspricht nach Abb.3 [1] in etwa der Breite des Primärladungsimpulses, diese wurde zu

$$T \approx 150 \,\mu\text{s}$$
 (4)

bestimmt.

4.4 Bestimmung der Totzeit nach der Zwei-Quellen-Methode

In sind die aufgenommenen Werte für die Impulsraten der ersten Quelle N_1 , der zweiten Quelle N_2 und beider Quellen N_{1+2} gelistet.

Impulsrate 1	Impulsrate 2	Impulsrate 1+2
$N_1 [s^{-1}]$	$N_2 [{\rm s}^{-1}]$	$N_{1+2} [s^{-1}]$
10.3 ± 0.3	73.9 ± 0.8	82.7 ± 0.8

Tabelle 2: Aufgenommene Impulsraten der Einzelquellen und beider Quellen zusammen

Nach ?? ergibt sich die Totzeit des Zählrohrs rechnerisch zu

$$T = (900 \pm 800) \,\mu\text{s}.$$
 (5)

4.5 Fehlerrechnung

Im folgenden Abschnitt sind die, für die Fehlerrechnung genutzten, Gleichungen aufgelistet, die mit Hilfe der gaußschen Fehlerfortpflanzung bestimmt wurden.

Der Fehler einer poissonverteilten Größer, wie die Anzahl der Radioaktiven Zerfälle ergibt sich durch

$$\sigma_P = \sqrt{P}.\tag{I}$$

Die Fehler der Impulsraten erhält man aus den Fehlern der Impulsanzahl durch

$$\sigma_N = \frac{\sigma_P}{\Delta t}.\tag{II}$$

Der Fehler der rechnerisch bestimmten Totzeit ergibt sich nach

$$\sigma_T^2 = \frac{N_1^2 N_2^2}{4} \sigma_{N_{1+2}}^2 + \sigma_{N_1}^2 \left(\frac{N_1 N_2}{2} + N_2 \left(\frac{N_1}{2} + \frac{N_2}{2} - \frac{N_{1+2}}{2} \right) \right)^2 + \sigma_{N_2}^2 \left(\frac{N_1 N_2}{2} + N_1 \left(\frac{N_1}{2} + \frac{N_2}{2} - \frac{N_{1+2}}{2} \right) \right)^2.$$
 (III)

5 Diskussion

Literatur

[1] Versuchsanleitung. V703 Geiger-Müller-Zählrohr. URL: http://129.217.224.2/ HOMEPAGE/PHYSIKER/BACHELOR/AP/SKRIPT/V703.pdf (besucht am 26.06.2014).